

Огляд артикуляторів

Огляд артикуляторів Artex від Amann Girrbach (Австрія)



- Легкий і ергономічний, матеріал карбон + металевий сплав
- Особлива точність симуляції рухів нижньої щелепи
- Контрольоване центральне положення
- Єдина калібрована система фіксації моделей Splitex
- Багато простору для роботи з моделями
- Три стійкі позиції, добрий фронтальний вид на модель

Артикулятор серії Artex BN



Нерегульований, Non-Arcon, має таку ж точність, як і всі інші системи Artex. Простий, надійний, зручний для використання. Сумісний з усіма артикуляторами Artex, може використовуватися

разом з лицьовою дугою.



- Магнітне кріплення моделі
- Centric має швидке блокування "механізм затиску"
- Попри компактні розміри, достатньо місця навіть для високих моделей
- Плоский різцевий столик
- Фіксований 15° кут Бенетта
- Фіксований 35° кут суглобового шляху

Артикулятор серії Artex CN



Середньоанатомічний артикулятор Non-Arcon. Завдяки помірній ціні – найбільш популярний карбоновий артикулятор базового рівня. В артикуляторі Artex CN реалізована можливість регулювати

кут Бенетта. Простий, зручний і дуже надійний у роботі. Сумісний з усіма артикуляторами Artex. Придатний для будь-якого способу перенесення параметрів лицьової дуги.



- Магнітне кріплення моделі
- Centric має швидке блокування "механізм затиску"
- Попри компактні розміри, достатньо місця навіть для високих моделей
- Три стійкі положення
- Регульований від 0° - 20° кут Бенетта
- Фіксований 35° кут суглобового шляху

Артикулятор серії Artex CT




Як і модель CN артикулятор має рамну карбонову конструкцію. Non-Arcon, напів-регульований з можливістю установки нахилу суглобового шляху від -15° до $+60^{\circ}$ і кута Бенетта від 0° - 20° . Також

реалізована можливість використання з лицьовою дугою.



- Магнітне кріплення моделі
- Centric має швидке блокування "механізм затиску"
- Попри компактні розміри, достатньо місця навіть для високих моделей

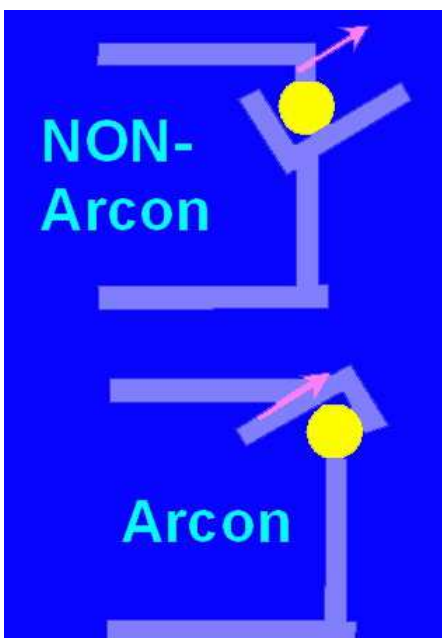

- Три стійкі положення
- Регульований від 0° - 20° кут Беннетта
- Регульований нахил суглобового шляху від -15° до $+60^{\circ}$

Уточнення: Враховуючи конструкцію суглобового механізму, розрізняють 2 види артикуляторів. В артикуляторах типу Arcon у верхній частині міститься елемент, що відповідає суглобовій суміші, в якій рухається округлий суглобовий відросток з нижньої частини арти-

кулятора. В артикуляторах Non-Arcon головки нижньої щелепи включені у верхню частину артикулятора, проте їх рух відбувається в нижній частині артикулятора.

Артикулятор серії Artex CP



Напіврегульований артикулятор типу Arcon, з можливістю установки нахилу суглобового шляху від -20° до $+60^{\circ}$ і кута Бенетта від -5° до $+30^{\circ}$.

Високоточна, стабільна і швидка фіксація центрального положення за допомогою двох механічно ведених півосей. Ергономічний зручний дизайн.



- Магнітне кріплення моделі
- М'яке ковзання суглобів
- Сумісність з усією серією Artex
- Дистракція 3 мм для попередньої компресії суглобових щілин
- Фіксатор Arcon-Clip запобігає випадковому відділенню верхньої частини від нижньої
- Регульований від -5° до $+30^{\circ}$ кут Бенетта
- Регульований нахил суглобового шляху від -20° до $+60^{\circ}$


Артикулятор серії Artex CR

Повністю регульований артикулятор.



Конструкція подібна до типу CR, проте цей артикулятор є універсальним приладом для діагностики і терапії, справжнім імітатором жувальних рухів у стоматологічному кабінеті і лабораторії.

Ідеальний для виготовлення і корекції шин і проведення аналізу моделей.

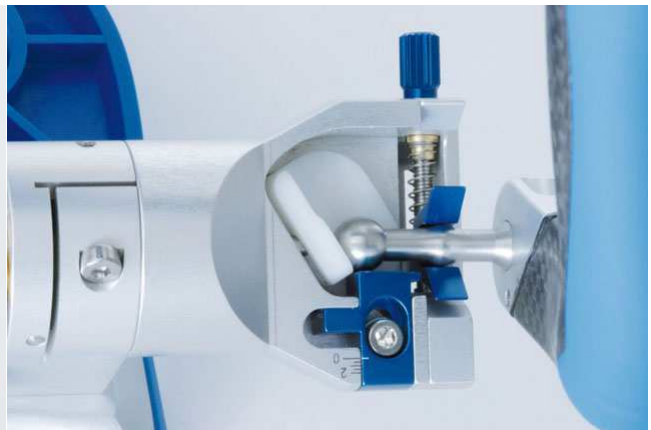

- Магнітне кріплення моделі
- Плавна установка початкового бічного руху суглобових голівок до 1,5 мм з кожного боку
- Сумісність з усією серією Artex
- Дистракція 3 мм для попередньої компресії суглобових щілин
- Регульована ретрузія від 0 до 2 мм
- Регульована протрузія від 0 до 6 мм
- Фіксатор Arcon-Clip запобігає випадковому відділенню верхньої частини від нижньої
- Регульований від -5° до $+30^{\circ}$ кут Бенетта
- Регульований нахил суглобового шляху від -20° до $+60^{\circ}$

Огляд артикуляторів Cori Dent (Південна Корея)

Артикулятор C.S.A 300

Середньоанатомічний артикулятор



Артикулятор C.S.A 400



Середньоанатомічний артикулятор з можливістю регулювання параметрів куту суглобового шляху.

Артикулятор C.S.A 600



Напіврегульований артикулятор з можливістю регулювання параметрів куту Бенетта та куту суглобового шляху. Обидві моделі CSA 600 і CSA 400 мають можливість встановлювати моделі за допомогою лицьової дуги, доповнюють одна одну і повністю сумісні.

Як і в моделі CSA 400 артикулятор має рамну конструкцію. Напіврегульований з регульованим кутом суглобового шляху в діапазоні 0° до 50° , також регульований кут Бенетта в діапазоні 0° - 45° . Реалізована можливість використання з лицьовою дугою.

Як і в моделі CSA 400 артикулятор має рамну конструкцію. Напіврегульований з регульованим кутом суглобового шляху в діапазоні 0° до 50° , також регульований кут Бенетта в діапазоні 0° - 45° . Реалізована можливість використання з лицьовою дугою.

- Магнітне утримання моделі
- Centric має швидке блокування з "механізмом затиску"
- Компактні розміри, проте, достатньо місця для високих моделей



Артикулятор C.S.A 600 з переносною штангою для розміщення моделі верхньої щелепи відносно показань лицьової дуги

Огляд артикуляторів ASA DENTAL (Італія) Моделі 5000 і 5010



Легкий анатомічний артикулятор, виготовлений з литого алюмінію. Автоматичне повернення до шарнірної вісі з пружинами. Простий доступ і огляд оральних просторів. Взаємозамінні алюмінієві базові пластини чи магнітні пластини. Чиста трансляція рухів. Збільшений розмір замикаючих гвинтів для базових пластин. Чудова стійкість у повністю відкритій (зворотній) позиції (для моделі 5010).

Технічні характеристики:

- Фіксований кут Бенетта на 17°
- Фіксований кут суглобового шляху на 30°
- Нахил різцевого столика – 10°
- Відстань між базовими пластинами – 85 мм
- Вага 400 гр.

Модель 5011



Легкий анатомічний артикулятор, виготовлений з литого алюмінію. Автоматичне повернення до шарнірної вісі з пружинами. Простий доступ і огляд оральних просторів. Взаємозамінні алюмінієві базові пластини чи магнітні пластини. Чиста трансляція рухів. Збільшений розмір замикаючих гвинтів для базових пластин. Чудова стійкість у повністю відкритій (зворотній) позиції. Регульований за допомогою гвинта задній штифт для роботи без різцевого штифта з підтримкою постійної траєкторії і кута під час бічних і задніх/передніх рухів. Штифт із системою анти-шок у випадку раптового падіння артикулятора.

Технічні характеристики:

- Фіксований кут Бенетта на 17°
- Фіксований кут суглобового шляху на 30°
- Нахил різцевого столика – 10°
- Відстань між базовими пластинами – 85 мм
- Вага 400 гр.

Модель 5030



Анатомічний артикулятор з литого алюмінію. Автоматичне повернення до шарнірної вісі з пружинами. Система анти-шок у випадку раптового падіння артикулятора. Збільшений розмір замкового гвинта для базової пластини.

Технічні характеристики:

- Фіксований кут Бенетта на 17°
- Фіксований кут суглобового шляху на 30°
- Нахил різцевого столика – 10°
- Відстань між базовими пластинами – 90-110 мм
- Вага 700 гр.

Модель 5032



Анатомічний артикулятор з литого алюмінію. Автоматичне повернення до шарнірної вісі з пружинами. Система анти-шок у випадку раптового падіння артикулятора. Збільшений розмір замкового гвинта для базової пластини. Регульований за допомогою гвинта задній штифт для роботи без різцевого штифта з підтримкою постійної траєкторії і кута під час бічних і задніх/передніх рухів

Технічні характеристики:

- Фіксований кут Бенетта на 17°
- Фіксований кут суглобового шляху на 30°
- Нахил різцевого столика 10°
- Відстань між базовими пластинами 90-110 мм
- Вага 700 гр.

Оклюдатори:
Модель 5001



Модель 5002



Комплект: 2 базових пластини + 2 гвинти для пластин