

Умовно-знімний замковий балковий протез на гвинтових абатментах

При недостатній кількості в кістковій тканині в передньому відділі було вирішено встановлювати імпланти південнокорейської системи імплантації SNUCONE AF + II у бічному відділі по проекції 14, 15, 16, 24, 25, 26 і операція з вертикального нарощування кісткової тканини в ділянці імплантатів 16 і 26.

Після інтеграції імплантатів і установки формувачів була зроблена корекція протеза з метою посадки протеза на формувачі.




За два тижні після загоєння ран навколо формувачів були підібрані прямі гвинтові абатменти з урахуванням висоти і ширини ясенного профілю імплантату.






Отримання попереднього відбитку для виготовлення індивідуальної ложки з трансферами для відкритої ложки.

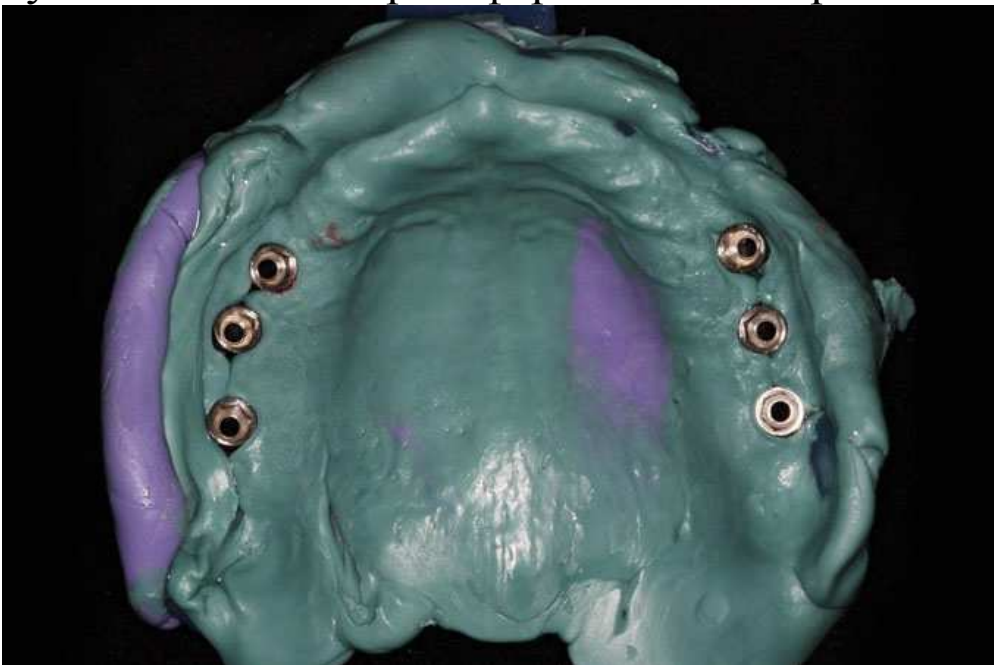

Закриття гвинтових абатментів за допомогою ковпачків, корекція і перебазування знімного протеза.

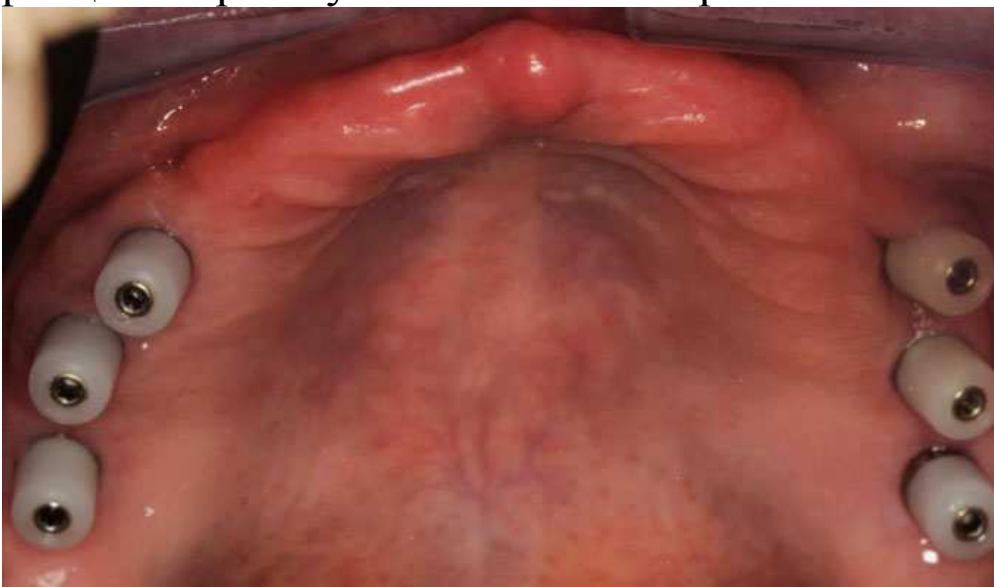





Визначення центрального співвідношення за допомогою воскового валика на жорсткому базисі, зафіксованого на гвинтові абатменти за допомогою титанових гвинтових циліндрів.





Зняття ковпачків, установка трансферчків, склеювання трансферчків між собою за допомогою беззольної пластмаси.



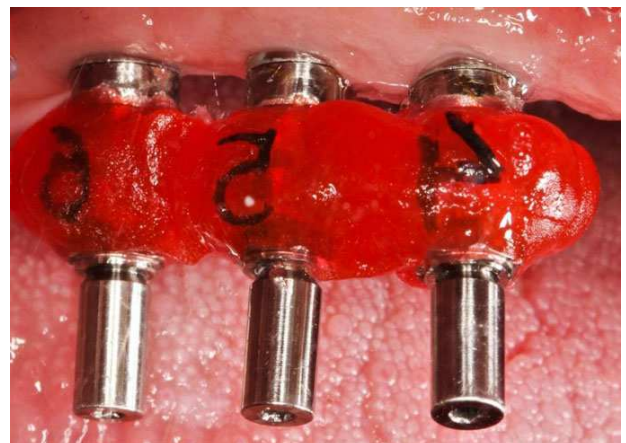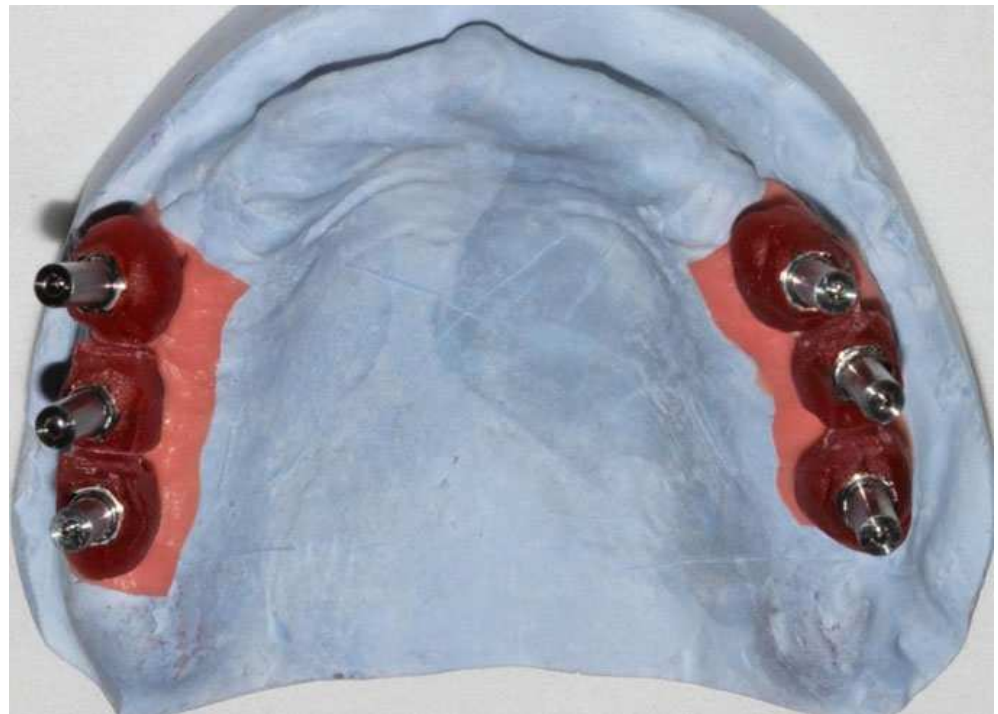


Отримання відбитку за допомогою монофазного і рідкого полівінілсілоксанового силіконового матеріалу. Виведення відбитку з порожнини рота після його полімеризації, установка ковпачків.





Примірка не оброблених і не заполірованих балок.



Здача протеза і фіксація балок на гвинтові абатменти за допомогою динамометричного ключа (15 Н/см).

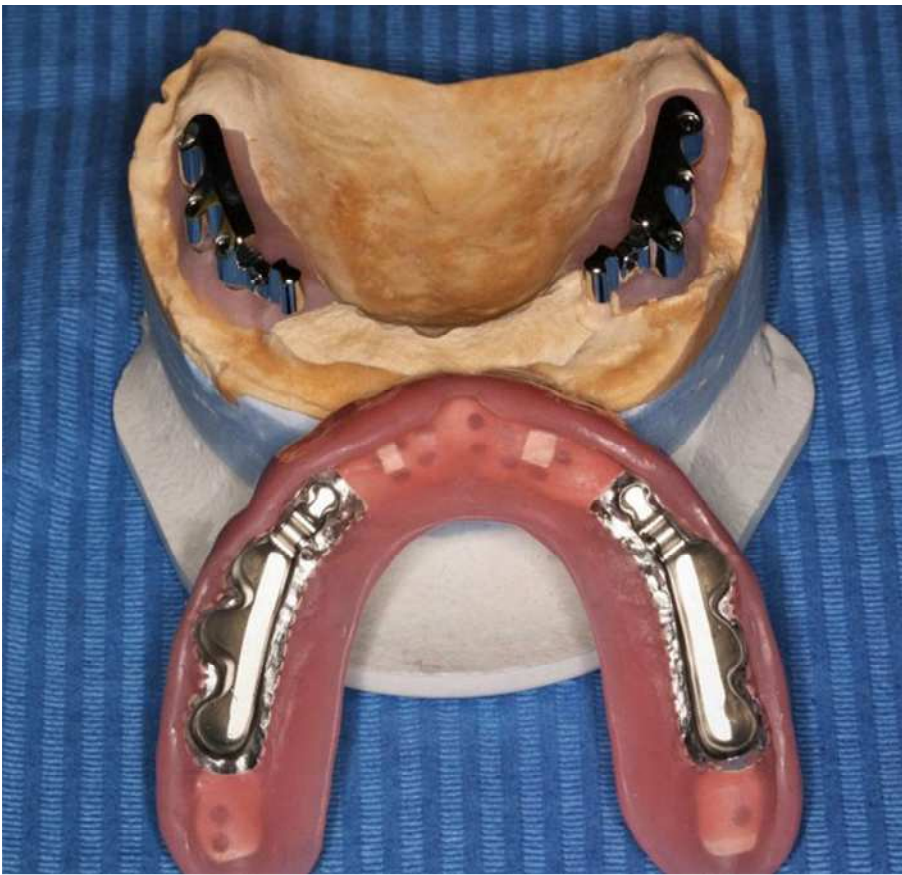

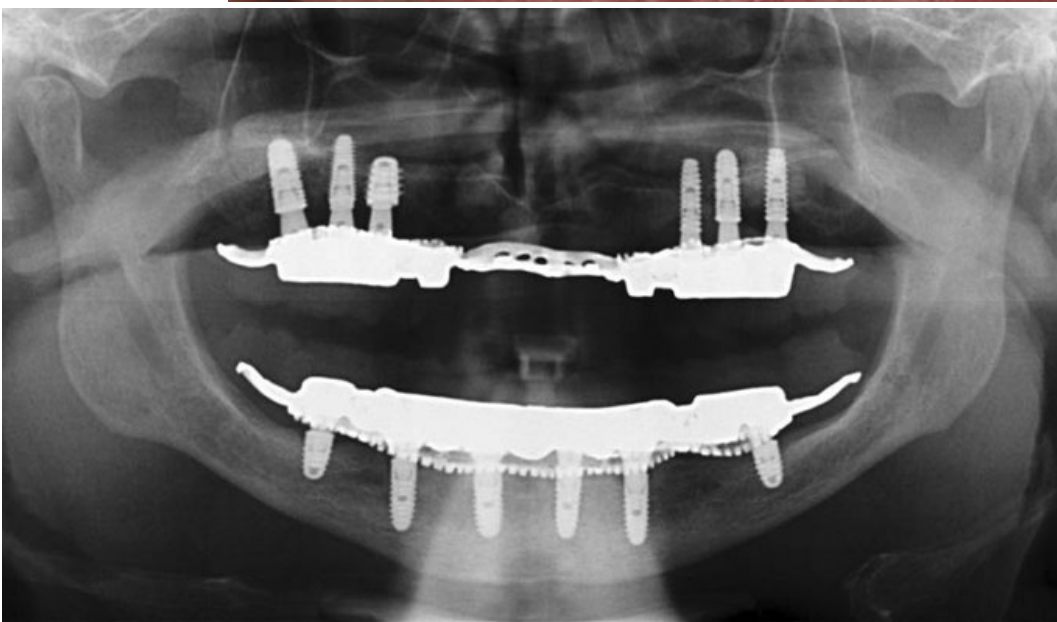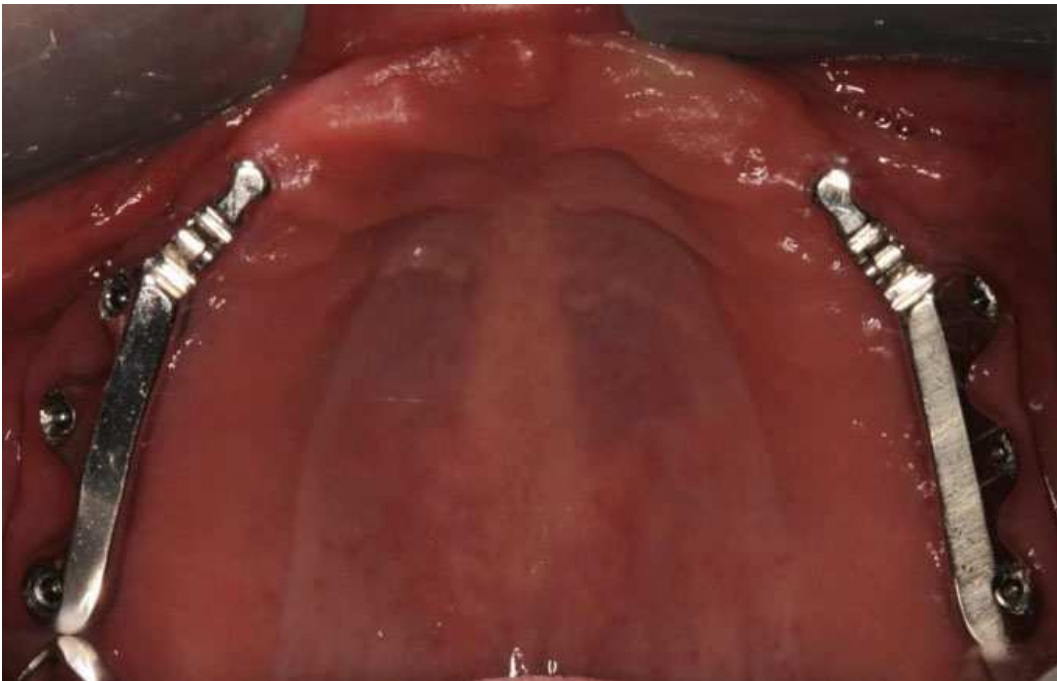

Навчання пацієнта експлуатації і догляду за протезом.
Автор: Сурен Давитян, лікар-стоматолог ортопед