

# Воски фірми «Yeti»

## Занурювальні воски


Занурювальні в пластинках

### *Занурювальний віск PRECI DIP*



Пластинки воску вагою 150 гр.

### *Занурювальний віск ELASTO DIP*

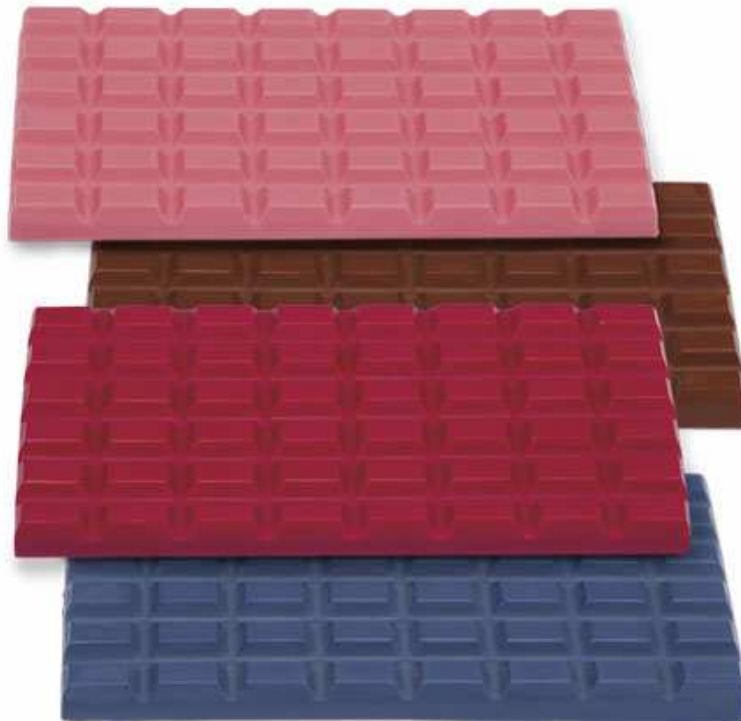

Пластинки воску вагою 150 гр.

- Особливо підходить для вторинних деталей у телескопічній і конусовій техніки;
- легко відміряти і змішувати з твердішим занурювальним воском PRECI DIP.

## Занурювальні воски в гранулах *Занурювальний віск DUO DIP*



Вага 80 гр.

DUO DIP – суміш занурювального воску в гранулах для повсякденного використання.

Гладка, закруглена форма гранул полегшує точне пограмове дозування і забезпечує чистоту при наповненні воскотопки.



## *Занурювальний віск MASTER DIP*



Вага 100 гр.

Незначний час охолодження дозволяє відразу провести корекцію ковпачка, матеріал швидко твердне і відповідає по міцності пластмасі. Висока точність і стабільність особливо помітна при литві металу.

Віск у гранулах, помаранчевий і прозорий.



## **Моделювальні воски**

***TNOWAX віск Моделювальний***



Віск для моделювання коронок, мостів і вкладок. Складається з природного воску і не містить синтетичних матеріалів.

Особливості:

- коли розплавлений – непрозорий, що дозволяє побачити форму вже в процесі нанесення воску;
- висока молекулярна щільність – легко ріжеться, залишаючи гладку поверхню;
- прекрасно поєднується із занурювальним воском;
- не містить синтетичних матеріалів.

Форма постачання: у бляшаних баночках вагою 70 г.

## ***VKS віск Моделювальний***



VKS – Віск для суцільнокерамічних систем (наприклад, для прес-керамики К2).

VKS – спеціальні воски для моделювання пресованої кераміки, зроблені на основі THOWAX. Багаторазово профільтровані, тому не містять непрозорих компонентів, які могли б призвести до не бажаних реакцій з пакувальною масою чи об'єктом відливання.

Форма постачання: у бляшаних баночках вагою 70 г.

### ***МОНОЛІТ THOWAX БЛОК***



Воски THOWAX пропонуються в різній формі. Металева підставка монолітного блоку придатна для багатократного вико-

ристання. Окрім звичної якості THOWAX, ця система має і інші переваги:

- швидка і легка зміна блоків;
- магніт використовується для утримання воскового блоку; на металевій підставці;
- гумова основа на дні підставки виключає ковзання;
- швидка витрата дозволяє уникнути забруднення воску;
- зручна висота і ергономічне дозування воску;
- віск використовується повністю, оскільки немає важко-доступного воску на краях і в кутах банки;
- прозора кришка захищає від бруду і пилу.



Форма постачання: 3 x 20 г воску одного кольору і якості.  
**WAX GIANT від Йоганна Петерса**



Методика воскового моделювання Йоганна Петерса демонструє – як у найкоротші терміни за допомогою систематизова-

них і раціонально побудованих кроків досягнути абсолютно природної і функціональної жувальної поверхні зуба. Оскільки концепція Йоганна Петерса включає як метод шкрябання воску так і його нанесення, для неї був потрібен віск, що відповідав для обох підходів. У результаті довгої спільної роботи Йогана Петерса і компанії Yeti були розроблені моделювальні воски Sahara і Sunlight, а також пришийковий віск Wood. Моделювальні воски визначаються:

- чудовими моделювальними властивостями, оскільки вони прекрасно тягнуться за шпателем і одночасно мають першокласну ступінь твердості;
- Оптимальна ступінь твердості воску дозволяє моделювання горбиків, схилів горбиків, а також інших найдрібніших деталей як за допомогою шкрябання, так і за допомогою нанесення;
- віск не "маститься" при згладжуванні і утворює щільну рівну поверхню;
- висока стабільність краю;
- прекрасно шкребеться і чисто наноситься;
- вигорає без залишку.

Кольори Sahara і Sunlight підібрані таким чином, що стає легко розпізнати навіть найдрібніші деталі зуба.

Форма постачання: у формі компактного циліндра вагою 75 г.

***IQ віск Моделювальний***



## **IQ віск Моделювальний**

- висока внутрішня стабільність – дуже твердий, але не крихкий;
- висока точка плавлення 62°C – того, що вигорає без залишку, 63° – непрозорого: ідеальний віск для літа;
- унікальна жорсткість – полегшує моделювальну побудову форми зуба;
- дуже хороші моделювальні характеристики при побудові жувальної поверхні;
- легко ріжеться і шкребеться;
- не містить синтетичних матеріалів;
- завдяки додаванню мікрівоску має високу щільність і дає мінімальну усадку.

Форма постачання: у формі компактного циліндра вагою 45 г.

## ***IQ віск Моделювальний***



Форма постачання: у бляшаних баночках вагою 45 г.

## ***NAWAX COMPACT***

Професійний і придатний для вискоблювання віск, для відтворення функціонального і наближеного до натурального зубного ряду.

Особливі характеристики:

- висока стійкість у моделюванні навіть найменших деталей;
- завдяки цьому робота проходить швидко і раціонально.



Завдяки високій температурі плавлення:

- жодних наступних обробок після моделювання;
- немає нужди в гравіруванні після відливання моделі;
- не потрібна додаткова обробка після моделювання;
- не потрібна додаткова поліровка після литва;
- дуже гладка поверхня;
- ніжний колір – приємний для очей.

Оптимальне використання в техніці моделювання.

Форма постачання: у формі компактного циліндра вагою 45 г.

## **Спеціальні воски**

### ***THOWAX Пришийковий віск***



- м'який безсвинцевий віск;
- не створює напругу, точне формування країв коронки;
- точно і тонко прилягає до маргінальної лінії.

Форма постачання: у бляшаних баночках вагою 70 г.

## **МОНОЛІТ Пришийковий віск**



Воски THOWAX пропонуються в різній формі. Металева підставка монолітного блоку придатна для багатократного використання. Окрім звичної якості THOWAX, ця

система має і інші переваги:

- швидка і легка зміна блоків;
- магніт використовується для утримання воскового блоку; на металевій підставці;
- гумова основа на дні підставки виключає ковзання;
- швидка витрата дозволяє уникнути забруднення воску;
- зручна висота і ергономічне дозування воску;
- віск використовується повністю, оскільки немає важкодоступного воску на краях і в кутах банки;
- прозора кришка захищає від бруду і пилу.

Форма постачання: 3 x 20 г воску одного кольору і якості.

## **WAX GIANT пришийковий віск**



Чудова якість воску – кращі моделювальні характеристики:

- Дозволяє моделювати найдрібніші фісури;
- можливість малювати воском;

- стабільність у розплавленому стані – легке моделювання форми зуба.

Характеристики воску:

- жорсткий, але не крихкий;
- висока внутрішня міцність;
- легко шкребеться;
- чисто наноситься;
- щільна посадка.

Форма постачання: у формі компактного циліндра вагою 75 г.

**THOWAX Базовий віск**



Чудово підходить як перший шар при моделюванні вкладок, коронок, вторинних деталей і для моделювання в межах цервікальної (пришийкової) ділянки.

- висока щільність дозволяє вирізувати краї коронок;
- особливо стабільний, не зміщується;
- непрозорий – для кращого контрасту зі штампиком.

Форма постачання: у бляшаних баночках вагою 70 г.

**МОНОЛІТ THOWAX Базовий віск у чіні**



Форма постачання: 3 x 20 г воску одного кольору і якості.

## ***IQ Віск для заглиблень***



- буфер між моделювальним воском і штампиком;
  - дуже еластичний;
  - згладжує всі нерівності;
  - не містить свинець, дещо липкий без поверхневої напруги;
- Форма постачання: у формі компактного циліндра вагою 45 г або в бляшаній баночці вагою 45 г.

## ***THOWAX Фрезерний віск, сірий непрозорий***



- обробляється інструментами при швидкості 5000 об/хв.;
- відсутність бруду і утворення стружки;
- хороші моделювальні характеристики, гладка поверхня незважаючи на особливу твердість;
- після обробки – добре видно будь-яку нерівність.

## **THOWAX Фрезерний віск, зелений прозорий**



Форма постачання: у бляшаних баночках вагою 70 г.  
**МОНОЛІТ THOWAX Фрезерний віск**



Форма постачання:  
3 x 20 г воску одного кольору і якості.

## **THOWAX Stick On віск липкий**



Для приклеювання вертикальних ливників і воскових проміжків.

- дуже липкий, легко коригувати положення деталей;
- залишається гладким і липким;
- згорає без залишку.

Форма постачання: у бляшаних баночках вагою 70 г.

## **THOWAX Віск липкий**




*не підходить для литва, не згорає без залишку*

- допоміжний віск для фіксації частин для робіт по ремонту і пайці, а також із зламаними протезами;
- висока твердість – віск відламується, що дозволяє відразу визначити небажане ковзання деталей.

Форма постачання: у бляшаних баночках вагою 70 г.

### **Воскові проміжки**

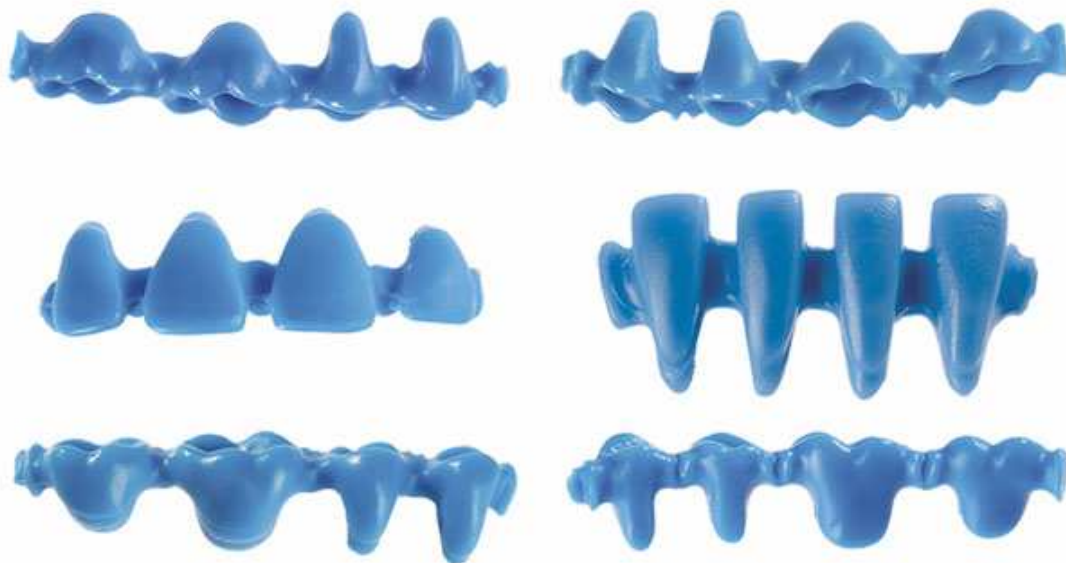

- з'єднання палатинальне/лінгвальне, можливо з вестибулярного боку;
- анатомічна форма;
- легке відділення без порушення естетики;
- 100 % віск, згорає без залишку;
- оптимальне поглиблення оклюзійних поверхонь для природного вигляду;
- колір: блакитний.