


Полірувальні засоби Renfert Polisoft A

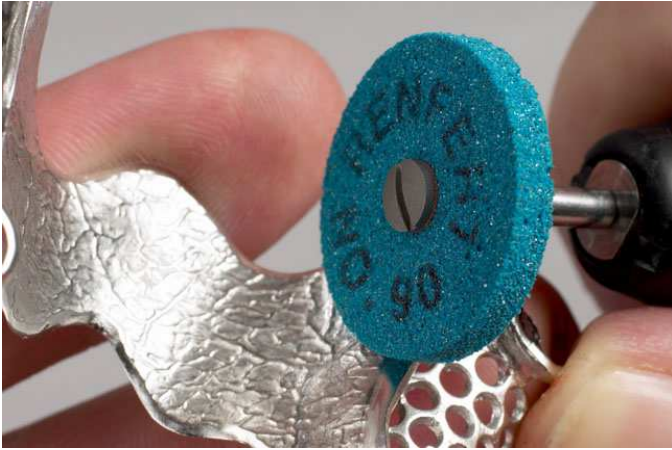

Для м'якої поліровки та ефективного згладжування твердих сплавів.

Переваги:

- Незначне утворення пилу та запахів.
- Надають поверхні матовий глянець і щільність.

Polisoft



Ефективно полірує сплави благородних і неблагородних металів. Переваги:

- Оптимальна альтернатива гумовим або силіконовим полірам при попередній поліровці.
- Добре полірує всі металеві поверхні.
- Не утворює пилу і запаху.

Силіконовий полір



Для попередньої поліровки кераміки і металу.

Переваги:

- Ідеальний для обробки переходів від металу до кераміки.

Щітка зі сріблястого дроту



Попередня поліровка металевих жувальних поверхонь.

Переваги:

- Зберігає оклюзійні і апроксимальні точкові контакти.
- Надає поверхні шовковистий глянець.
- Ідеальна підготовка до дзеркальної поліровки.

Bison – Полірувальна щітка



Унікальна суміш ворсу забезпечує ефективну і швидку дзеркальну поліровку сплавів, кераміки і облицювальних пластмас.

Переваги:

- Щільний, міцний ворс для тривалого використання.
- Особливо підходять для поліровки жувальних поверхонь і міжзубних ділянок.
- Прекрасне вбирання полірувальних засобів.

Щітка з козиним ворсом



Для поліровки поверхонь благородних металів і пластмас.

Переваги:

- Хороше вбирання полірувальної пасти – гарантія оптимального результату.

Бавовняний полірувальний круг



Для дзеркальної поліровки пластмасових зубів і вінірів за допомогою мікромотора.



Переваги:

- Оптимальне вбирання полірувальної пасти, без злипання.
- Тривалий термін служби.

Dia-Finish L – шліфувальні диски



Високоякісні шліфувальні диски з найдрібнішими алмазними частками для поліровки кераміки і облицювальних пластмас.

Переваги:

- Оптимальне поєднання полірувального фільца і алмазної пасти.
- Для поліровки кераміки.

Вузька щітка



Класична щітка для поліровки кобальто-хромових сплавів або твердих сплавів благородних металів на шліфмоторі.

Переваги:

- Точна поліровка завдяки щетинкам з тонким кінцем.
- Ідеальна для вузьких ділянок каркасів.
- Висока стійкість щетини і при сильному навантаженні.



Щітка Chungking



Щітка-круг для попередньої поліровки кобальто-хромових сплавів.

Переваги:

- Заощадження часу завдяки подвійній ефективності поліровки – за допомогою льняних прокладок і щетини Чун-цін (Chungking).
- Одночасне виконання попередньої поліровки і ущільнення.

Спеціальна щітка



Особливо добре підходить для поліровки кобальто-хромових каркасів із застосуванням полірувальної пасти.

Переваги:

- Вузька щітка, добре проникає в усі ділянки.
- Щетина Chungking якості I, у два ряди.
- Міцна, коротка щетина (10 мм) здатна переносити високі навантаження.

Slim



Полірувальна щітка Slim особливо добре підходить для полірування міжзубних ділянок на пластмасових протезах.

Переваги:

- Вузька щітка для точної поліровки зі шліфмотором.
- М'яка щетина запобігає сильній абразії.
- Проміжні ділянки щітки забезпечують ефект охолодження.

Полотняний круг із силіконовим просоченням



Для попередньої поліровки пластмасових протезів з вологою пемзою.



Переваги:

- Надає поверхні шовковий матовий блиск.
- Відсутність ворсинок завдяки просоченню.
- Оптимальна поліровка – зокрема глибоких піднебінних ділянок.

Складчастий полірувальний круг з бязі

Бязь – бавовняна щільна тканина полотняного переплетення



Для дзеркальної поліровки великих поверхонь пластмасових протезів.

Переваги:

- Завдяки криво нарізаному матеріалу немає ворсинок.
- Складки сприяють оптимальному охолодженню і швидшій поліровці.