


Здача протеза

На термін служби зубного протеза значною мірою впливають гігієна порожнини рота і правильне користування. Пацієнтові це треба дохідливо роз'яснити і відповідно проінструктувати. Лікар-стоматолог повинен пояснити і показати пацієнтові посадку зубного протеза в заданому напрямку введення. Потім пацієнт повторює ці вправи самостійно. Тільки якщо заданий напрямок введення протеза дотримується, протез надівається під дією жувального тиску. Горизонтальні сили, що виникають при неправильному введенні протеза, можуть бути причиною перевантаження кламерних зубів. Наприкінці ретельно контролюється фіксація протеза в порожнині рота. Сили відтягування, що виникають при жуванні клейкої їжі, не повинні відривати протез від його ложа. Протези нижньої щелепи, які зрушуються під тиском язика, необхідно виправити.


Пасивні частини кламера під час посадки протеза діють як направляючі площини, якими протез рівномірно ковзає в кінцеву позицію. Особливо при великій кількості кламерів і глибоких заглибленнях пацієнту необхідно показати, на які опорні зуби він, у першу чергу, повинен орієнтуватися при надяганні і знятті протеза. Щоб уникнути деформації кламерів на цоколі моделі рекомендується помітити цифрами послідовність їх зняття. Пацієнтові треба пояснити, як використовувати для зняття протеза опорні плечі кламера, штучні зуби та інші допоміжні елементи. Найпізніше, на цьому етапі необхідно закруглювати всі гострі краї протеза та кінці кламера. Під'язикова

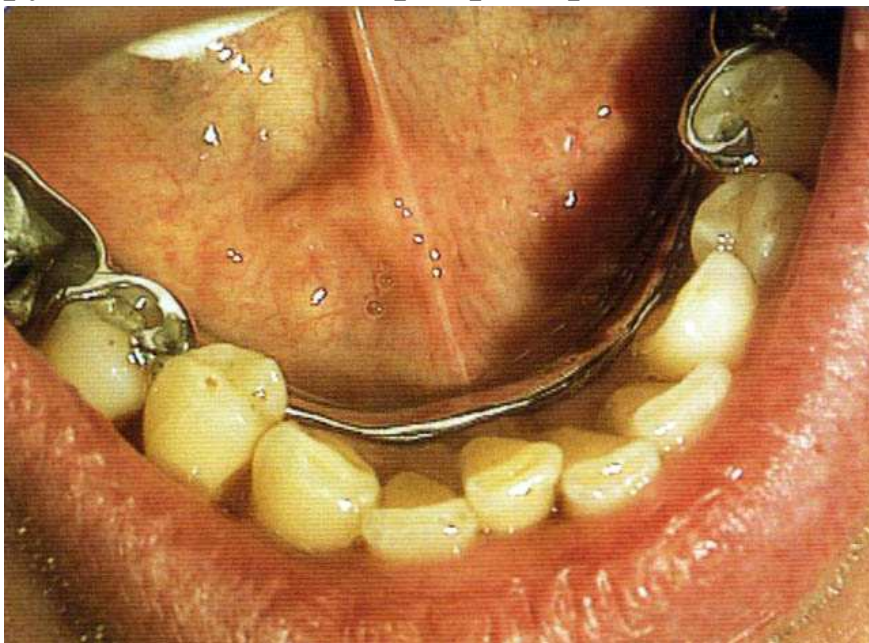

ва дуга не повинна обмежувати функцію язика.

Під'язикова дуга

Піднебінні дуги верхньої щелепи перевіряються на щільне, без проміжку, прилягання. Ретельна перевірка оклюзії і артикуляції допомагають уникнути часткових перевантажень сидловидних частин протеза.

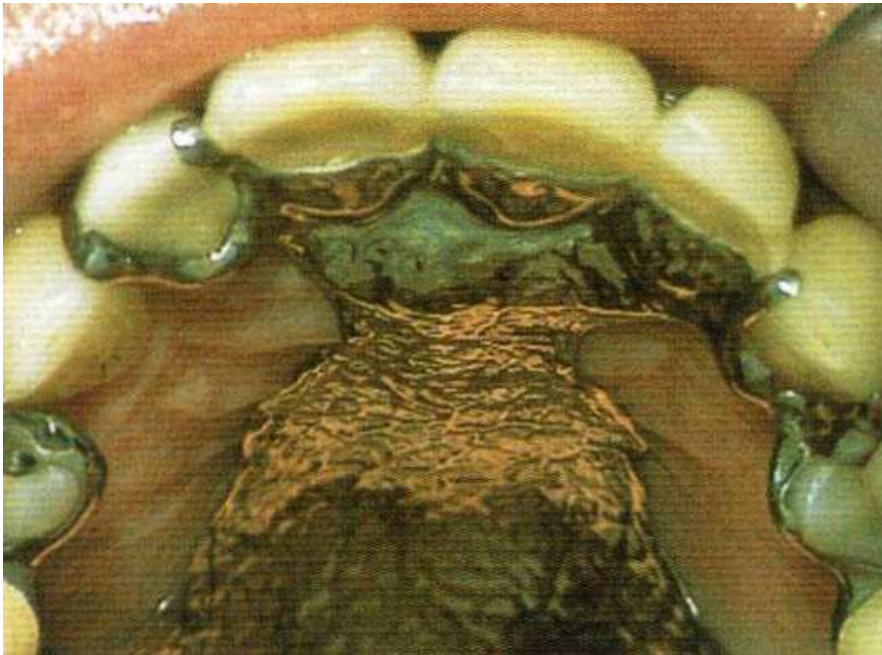

Точне прилягання протеза верхньої щелепи

Недопустимі передчасні контакти штучних зубів на сидловидній частині кінцевого дефекту. Масивні порушення оклюзії можуть статися через оклюзійні елементи протеза (наприклад, кламерів). Це часто вимагає великих виправлень, аж до виготовлення нової конструкції.

Примітка: Особливо при складних ситуаціях рекомендується примірка каркаса бюгельного протеза з постановкою штучних зубів у воску (воскова примірка). Каркас бюгельного протеза повинен встановлюватися з невеликим опором, але при цьому не перекошуватися! У кінцевій позиції кламери повинні прилягати на зуб без напруги і знаходитися на достатній відстані від краю ясен.

Причиною незадовільного прилягання протеза можуть бути помилки при знятті відбитку. Вони виникають, наприклад, у ситуаціях із сильно нахиленими зубами або при сильно виражених, відкритих міжзубних ділянках. У випадку повторного виготовлення бюгельного протеза необхідно зробити новий відбиток.