


Установка дублікат-моделі в артикулятор



Силіконовий ключ

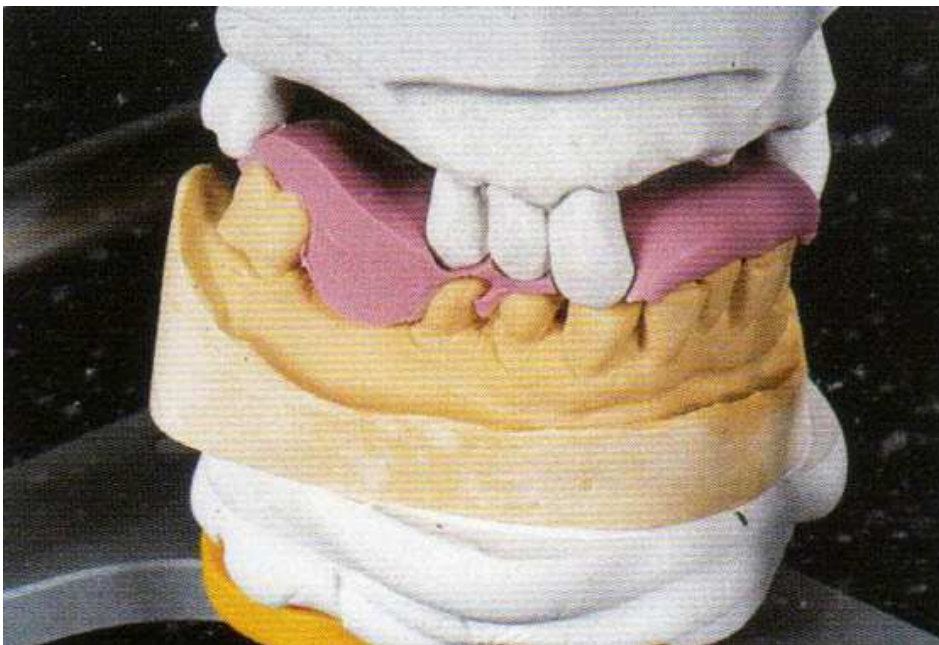

*За допомогою
силіконового*

ключа можна точно перенести вогнетривку модель

Якщо умови оклюзії вимагають постановки дублікат-моделі в артикулятор, то на нижньому боці майстер-моделі можна зробити канавки. Від них при дублюванні моделі в силіконовій формі виходять клиновидні виступи. За допомогою цих канавок дублікат-модель встановлюється в артикулятор. Але треба враховувати, що дублікат-модель через розширення пакувальної маси не відповідає розмірам гіпсової моделі. Тому доцільно переносити дублікат-модель в артикулятор за допомогою силіконового ключа (силіконовий прикус). Силіконовий прикус робиться з гіпсової моделі в артикуляторі. Він швидко і точно фіксує модель з вогнетривкої маси.