

## Коронка і вкладка в одному мікропротезі

Цей випадок не є надзвичайним, а швидше найзвичайнішим. Пацієнтка звернулася із скаргою на дискомфорт у зубі 46. Було проведене лікування кореневих каналів і рекомендовано встановити вкладку-оверлей.

Під час підготовки кукси було прийняте рішення зробити препарування з язичного боку під вкладку для збереження об'єму тканини зуба, а з вестибулярного – препарування під повну коронку, щоб приховати зміну кольору і клиновидний дефект. Благо, технологія роботи із склокерамікою, посиленою дисилікатом літію E.max дозволяє створювати довільну межу препарування, на відміну від використання металокераміки, де необхідно виконувати тільки традиційне препарування.

У даному клінічному випадку була виготовлена коронка з E.max CAD HT A1 за допомогою CEREC. Для надання реставрації природного вигляду, вона забарвлена фарбами і вкрита глазур'ю. Стандартне кристалізаційне спікання при температурі 840 градусів.

Коронка встановлена на зуб з ізоляцією робочого поля на Variolink 2. Корекція по прикусу не проводилася.

Фотозвіт роботи:

Вихідна ситуація:



Вигляд препарованого зуба:



Виготовлена коронка-вкладка:



*До розфарбовування*



*Після розфарбовування*




*Коронка-вкладка із заготовкою*

Готовий результат:



## Моделювання в програмі:

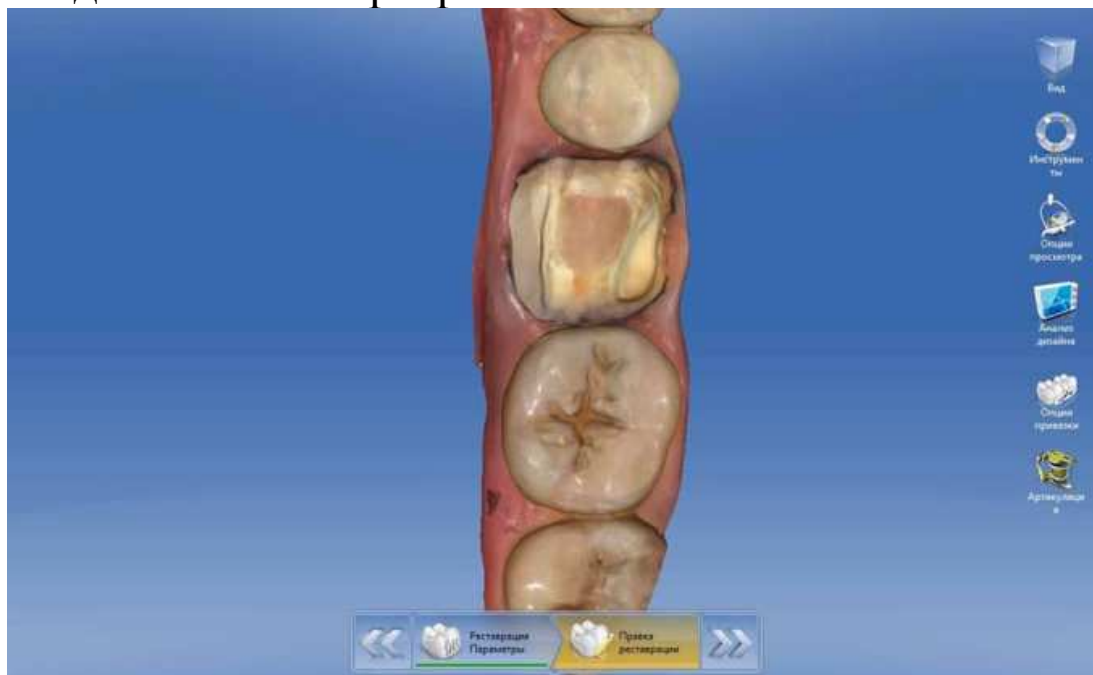



Автор: С. Белоус, лікар-стоматолог терапевт, ортопед, хірург