


Виготовлення куксової вкладки

Пропонуємо вашій увазі кадри з навчального відео з виготовлення металевої куксової вкладки.

1 Замірювання глибини кореневого каналу:





2 Ізолювання кореневого каналу:


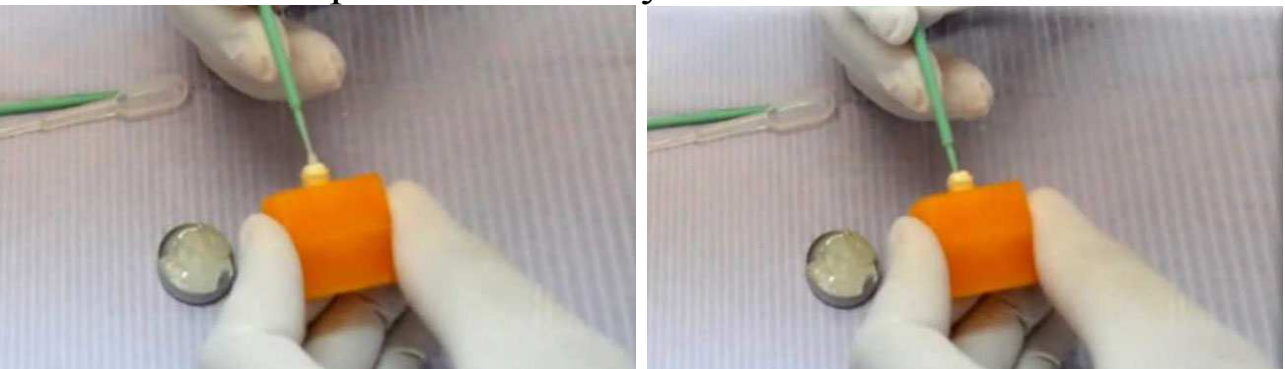


3 Формування кореневої частини вкладки із самотверднучої пластмаси:





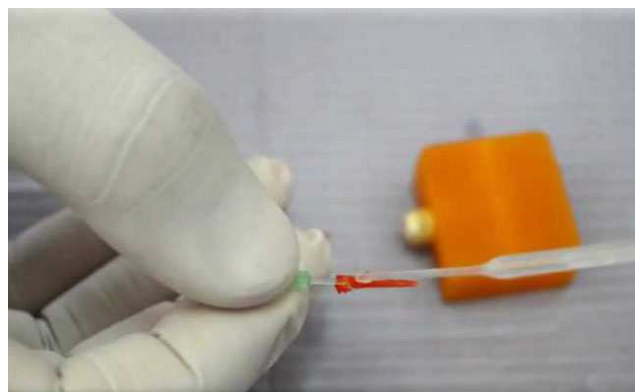
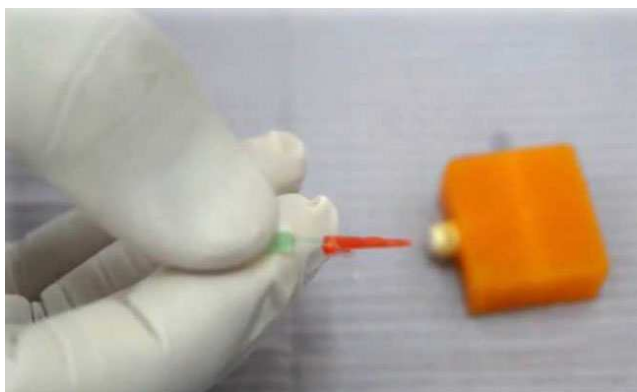


4 Подальше формування кореневої частини вкладки:


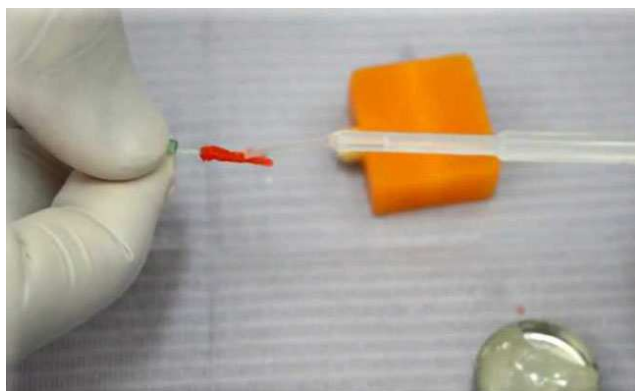
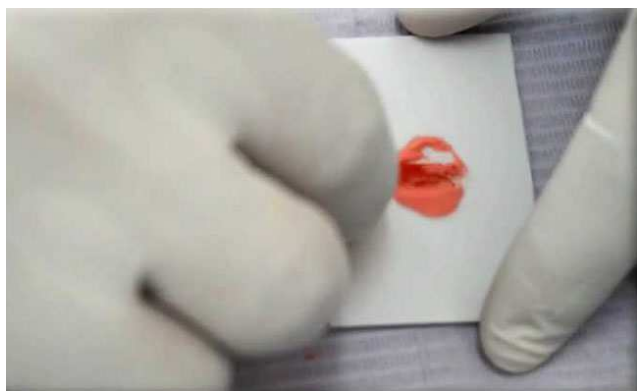


5 Формування куксової частини вкладки:

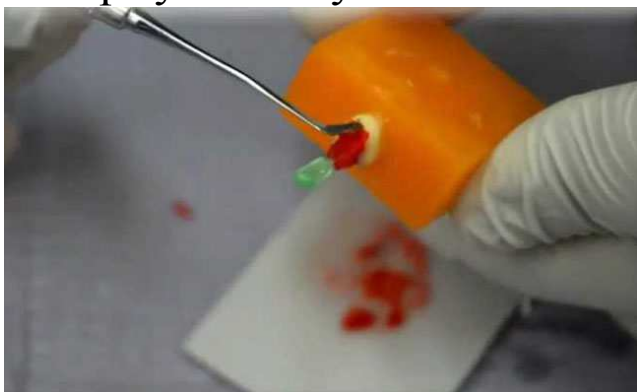


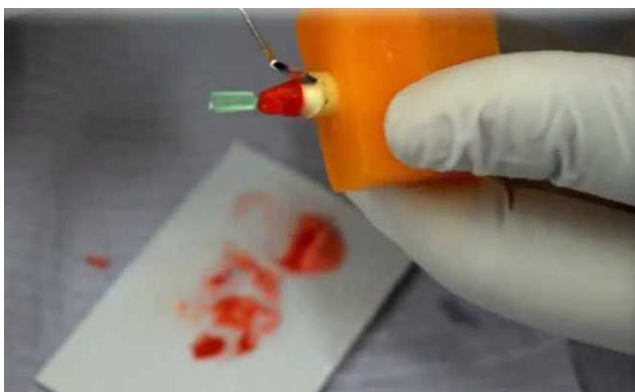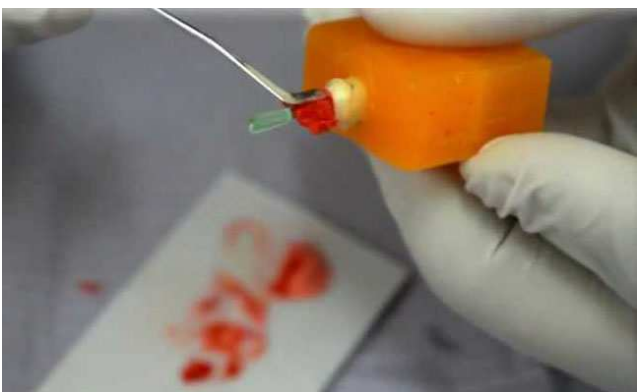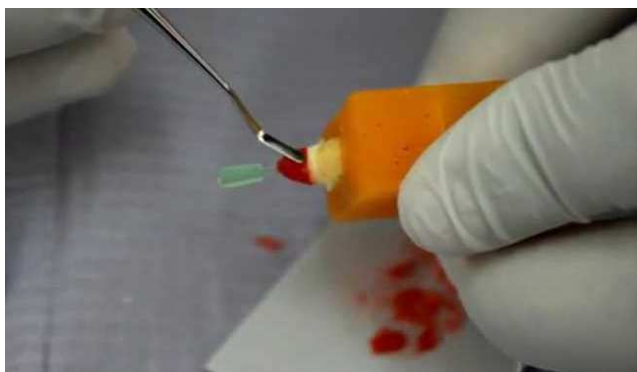

6 Подальше формування кукової частини вкладки:

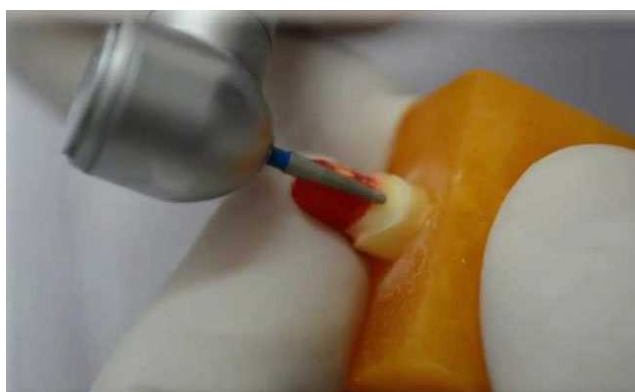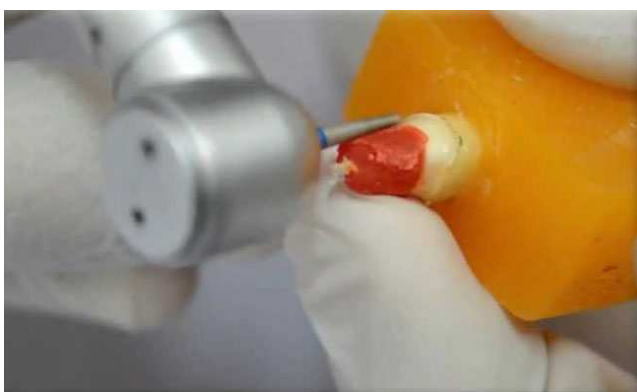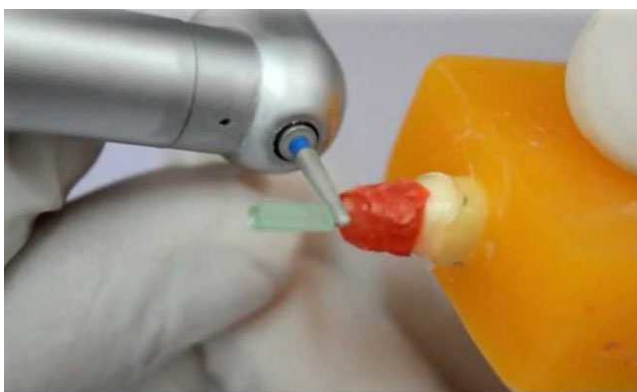

7 Сформована кукова вкладка:

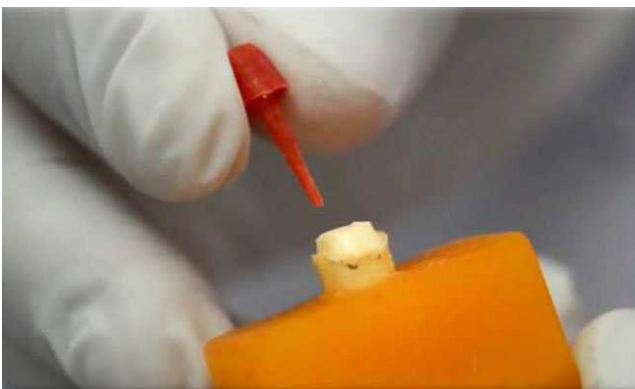

8 Виготовлена металева куксова вкладка:



Окрім використання самотверднучої пластмаси також можливе застосування восків.

При виготовленні кореневої частини вкладки краще використовувати стандартні пластмасові заготовки, а за їх відсутності – пластикові зубочистки чи зубці з одноразових вилок.

За умови якісної підготовки кореневого каналу (правильного формування устя кореневого каналу, а також забезпечення адекватного перерізу та глибини) і фіксації куксової вкладки, ортопедичні конструкції закріплені на них радуватимуть пацієнта тривалий період часу ☺.

Окрім металу, матеріалом виготовлення кукових вкладок може бути оксид цирконію:

Вкладка на моделі:



Оксидцирконієва вкладка окремо:



Вкладка на моделі і окремо:

